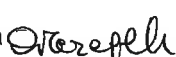
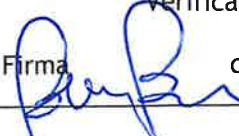


SOMMARIO

1. Scopo
2. Modalità operative

Redazione	Verifica	Approvazione
Firma  data 22/05/23	Firma  data 31/5/23	Firma  data 1/06/23
		Casa di Cura Privata Città di Bra S.p.A. Il Direttore Sanitario Dott. Flavio BORASO

1. Scopo

La presente istruzione operativa ha lo scopo di indicare agli operatori coinvolti le modalità di evacuazione del contenuto della frigo-emoteca (sangue ed emoderivati), in caso di mal/non funzionamento della stessa.

2. Modalità operative

2.1 Nel caso in cui si verifichi un mal funzionamento/non funzionamento della frigo-emoteca avvertire sempre la manutenzione (dopo aver sentito il segnale acustico e verificata la temperatura alterata sul display);

2.2 Verificare il corretto funzionamento del frigo-farmaci (Fiocchetti MED 0203) presente nello stesso locale in cui si trova la frigo-emoteca (locale lavoro Infermieri - 3° piano);

2.3 Se il frigo-farmaci funziona correttamente, trasferirvi il contenuto presente nella frigo-emoteca (N. 6 sacche di gruppo "O" di scorta e le sacche di emoderivati assegnate ai pazienti ricoverati);

2.4 Trasferire il foglio di registrazione del monitoraggio di controllo della frigo-emoteca sul frigo-farmaci e continuare i controlli come da prospetto (ogni 8 ore ai cambi turno, da parte dell'Infermiera responsabile del turno stesso);

2.5 Apporre sulla frigo-emoteca un foglio di avviso in cui segnalare il trasferimento delle sacche nel frigo-farmaci.

2.6 Quando il corretto funzionamento dell'apparecchiatura è stato ripristinato, effettuare il percorso a ritroso e ri-trasferire il sangue e gli emoderivati nella frigo-emoteca stessa.