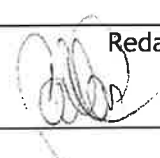


SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Redazione		Verifica		Casa di Cura Città di Bra S.p.A. IL DIRETTORE SANITARIO MANFREDI GRASSO	
Firma	data	Firma	data	Firma	data
	6/12/22		7/12/22		7/12/22

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di consentire il corretto utilizzo dei tavoli operatori nel Reparto Operatorio.

Standardizzare i comportamenti e le procedure.

2. DESTINATARI

Infermieri ed OSS.

3. MODALITA' OPERATIVE

Il Reparto Operatorio è fornito di tre colonne della ditta Maquette con altrettanti piani della stessa casa costruttrice più due colonne e di due piani della ditta OPT. Ad ogni colonna è abbinato un telecomando ad infrarossi ad altissima frequenza che funziona solo con quella determinata colonna.

Per riconoscerli tra di loro è stato attribuito un segnale di codifica:

- ☐ una colonna è stata identificata con il codice D3 a cui corrisponde il telecomando on codice D3;
- ☐ un'altra colonna con codice D0 a cui corrisponde il telecomando D0;
- ☐ un'altra colonna con codice DF a cui corrisponde il telecomando DF;

NON BISOGNA MAI INTERSCAMBIARE LE COLONNE CON I TELECOMANDI PENA IL NON FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO OPERATORIO.

I telecomandi hanno una batteria interna che va ricaricata quotidianamente nell'apposito alloggio posto sulla parete della Camera Operatoria.

Sul telecomando non esistono spie di avvenuta ricarica o di ricarica in corso, l'unica prova che ciò avvenga è un leggero calore emanato dall'accumulatore quando posto in carica per un determinato periodo di tempo.

Le colonne funzionano a batterie le quali hanno un'autonomia di 100 interventi (a detta del costruttore) per cui l'ideale è di ricaricarle una volta la settimana. La carica completa degli accumulatori dura circa 12 ore.

Per caricare le batterie esiste un trasformatore per ogni colonna il quale ha 2 cavi di cui uno si collega alla colonna nell'apposito connettore posto alla sua base e l'altro alla presa di corrente (i cavi vanno collegati proprio in quest'ordine).

Sulla colonna si accendono due led, uno indica che il letto è stato collegato alla rete elettrica mentre l'altro ci fornisce informazioni sullo stato di carica delle batterie:

- led di colore verde → indica che le batterie sono in carica
- led di colore giallo fisso → significa che gli accumulatori sono carichi
- led di colore giallo lampeggiante + segnale acustico → avvisa che le batterie sono scariche

La ditta costruttrice indica di **NON UTILIZZARE I TAVOLI OPERATORI QUANDO SONO IN CARICA COLLEGATI ALLA RETE ELETTRICA.**

Inoltre fornisce l'indicazione di **UTILIZZARE I TAVOLI OPERATORI CON IL CAVO DELLA MESSA A TERRA COLLEGATO.**

Tavoli Operatori OPT/80 sono dotati di telecomandi che non richiedono ricarica poiché collegati direttamente alla base tramite cavo.

La colonna a tre livelli di risparmi energetico per gli accumulatori:

- Dopo i 5 minuti di inattività entra in modalità stand-by e si riattiva premendo un qualsiasi tasto;
- Dopo 6 ore di inoperosità si spegne e si ripristina attivando il tasto START posto sulla base;
- Dopo la completa perdita di carica degli accumulatori, ma in questo caso, oltre all'attivazione col tasto START bisogna collegare il letto alla rete elettrica.

Gli accumulatori degli OPT hanno una tenuta della carica molto limitata nel tempo per cui si è stabilito di metterli in carica due volte a settimana. La casa costruttrice non fornisce direttive che scoraggino l'utilizzo del tavolo mentre gli accumulatori sono in carica, tuttavia suggerisce di collegare sempre il cavo al nodo equipotenziale.

N.B. I TAVOLI OPERATORI VANNO UTILIZZATI SEMPRE SENZA CARRELLO INSERITO POICHE', IN SUA PRESENZA, GLI UNICI MOVIMENTI CONSENTITI SONO QUELLI DI SALITA E DI DISCESA.

A fine seduta, tutti i letti vengono caricati sugli appositi carrelli e rimossi dalla loro sede per compiere tutte le operazioni di detersione e disinfezione.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sull'utilizzo dei TAVOLI OPERATORI fare riferimento ai rispettivi manuali d'uso e manutenzione, situati nell'apposito armadio dedicato alle apparecchiature all'interno del blocco operatorio.

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell’Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).