

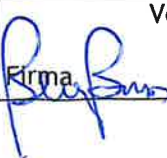
SOMMARIO

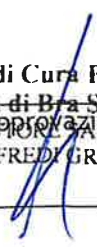
1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Casa di Cura Privata
 Città di Bra S.p.A.

Approvazione
 IL DIRETTORE SANITARIO
 MANFREDI GRASSO

Redazione
 Firma  data 5/12/22

Verifica
 Firma  data 6/12/22

Approvazione
 Firma  data 6/12/22

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di permettere il corretto utilizzo dell'Autoclave GETINGE e nello stesso tempo di fornire delle Linee Guida per la formazione di nuovi operatori.

2. DESTINATARI

Infermieri.

3. MODALITA' OPERATIVE

PROGRAMMI DI STERILIZZAZIONE

- ☐ P1 134 °C - 5 minuti di sterilizzazione (Materiale poroso + oculistica);
- ☐ P2 121 °C - 20 minuti di sterilizzazione
- ☐ P3 134 °C - 7 minuti di sterilizzazione (carico pesante)
- ☐ P4 134 °C - ciclo di riscaldamento
- ☐ P5 134 °C - ciclo di pre-vuoto
- ☐ P6 test Bowie-Dick
- ☐ P7 avvio programmato

N.B.: Per l'avvio di P1, P2 e P3 non è necessaria la Password, è sufficiente selezionare il programma desiderato e premere il tasto di avvio controllando sempre che il *led* chiusura porte sia acceso. Per tutti i programmi c'è la possibilità di interrompere il ciclo.

CARICO AUTOCLAVE

I containers da sterilizzare vengono posizionati su un'apposita griglia, che serve per il collocamento dei containers stessi in autoclave, posta su di un carrello di trasporto;

A questo punto:

- ci si avvicina con il carrello al portellone dell'autoclave
- si frenano le ruote del carrello,
- si sblocca la griglia con la leva posta sul davanti del carrello
- quindi si spinge la griglia all'interno dell'autoclave;
- si sbocca il carrello e si allontana dal portellone.

Per i programmi P4 e P5 si deve posizionare il carrello vuoto.

Per il programma P6 si deve posizionare il carrello vuoto con una griglia al centro dell'autoclave ed il suo bussolotto apposito.

SCARICO AUTOCLAVE

- a fine ciclo si accende il led verde fisso con la scritta "ciclo completo";
- a questo punto:
 - il portellone si apre in automatico dal lato pulito (vedi legenda simboli presente in allegato);
 - si avvicina il carrello porta-griglia al portellone;
 - si frenano le ruote
 - si estrae la griglia dall'autoclave;
 - si blocca con l'apposita leva.
 - si chiude il portellone
 - si consegna il bussolotto all'infermiere presente in confezionamento per controllo indicatore e successivo scarico e stoccaggio del materiale.

N.B.: A fine giornata, prima di spegnere l'autoclave, chiudere sempre entrambi gli sportelli, aspettare che si accenda il led sul simbolo porta chiusa e spegnere l'autoclave girando la chiavetta sul simbolo 0.

TECNICA

La Tecnica consiste nel:

- Accendere l'Autoclave girando la chiavetta sul simbolo I (lo sportello deve essere chiuso correttamente); in automatico si accende anche la stampante;
- Selezionare programma P4 (riscaldamento), l'Autoclave va in temperatura dopo circa 20 minuti dall'accensione;
- Per dare lo Start a P4 occorre:
 - a. premere il *tasto di avvio*, a seguire si deve mettere il login (user) e la password (1234); a questo punto il ciclo ha inizio;
- Terminato il ciclo P4 appare la scritta "ciclo completo";
- Si chiude il portellone e si aspetta che si accenda il led chiusura porte;
- A seguire, si eseguono anche il P5 e il P6 nella stessa metodica del precedente (per il P6 vedere la sezione programmi).

MANUTENZIONE AUTOCLAVE

Lavaggio della camera a freddo con acqua e acido peracetico e controllo del filtro posizionato al centro della camera per verificare che non vi siano impurità o residuo di colla, una volta alla settimana a giorni alterni.

Le autoclavi eseguono:

- manutenzione ordinaria (ogni 6 mesi);
- eventuale manutenzione straordinaria (quando necessita);
- manutenzione annuale: prove termometriche (no prove con teleria).

N.B.: In caso di emergenza l'autoclave può essere bloccata da un tasto di sicurezza posto vicino all'interruttore di accensione (funghetto rosso). Per far ripartire l'autoclave basta girare la chiavetta e il tasto ritorna alla posizione originaria.

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).