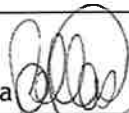
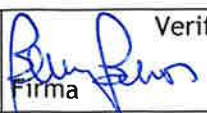
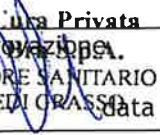


SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Firma 	Redazione data 18/11/22	Firma  Verifica data 20/11/22	Casa di Cura Privata Città di Bra Approvazione IL DIRETTORE SANITARIO MANFREDDI CRASSA Firma  data 21/11/22
---	----------------------------	--	---

ATTENZIONE: la mancanza delle firme indica che questo documento è una stampa della versione aggiornata disponibile in rete ed utilizzabile per sola lettura.

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di permettere un corretto utilizzo delle Bi Clamps (Clamps per coagulazione bipolare) da utilizzarsi esclusivamente su apparecchiatura Erbe Vio.

Standardizzare procedure ed uniformare i comportamenti.

2. DESTINATARI

Personale medico qualificato ed addestrato al loro utilizzo, infermieri.

3. MODALITA' OPERATIVE

Le Clamps sono dotate di un riconoscimento elettronico ovvero il prodotto e le sue specifiche vengono riconosciuti automaticamente dall'apparecchiatura dopo l'introduzione del cavo di connessione.

- Prima dell'utilizzo verificare tutti gli isolamenti e l'eventuale presenza di danni meccanici, i prodotti devono essere puliti e disinfettati secondo protocollo.
- Durante l'utilizzo evitare il contatto accidentale con il tessuto e mantenere anche un appropriata distanza dal tessuto che non coinvolto nell'intervento.
- Subito dopo l'impiego, trattare lo strumento per il riutilizzo (attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore del detergente e del disinfettante).

Pulizia - disinfezione - sterilizzazione:

Erbe raccomanda di eseguire una pulizia-disinfezione meccanica, ammettendo anche il trattamento manuale.

Il prodotto deve essere sottoposto a pulizia preliminare entro e non oltre 2 ore dall'utilizzo.

Pulizia manuale:

- Utilizzare un detergente liquido adatto all'impiego nel bagno ad immersione (può essere utilizzato anche l'ultrasuono).
- Immergere lo strumento con le ganasce aperte in modo che risulti completamente coperto, e non deve essere a contatto con altri strumenti.

Per il tempo di immersione seguire le indicazione del prodotto utilizzato.

- Rimuovere lo sporco ostinato con un panno morbido o una spazzola con setole morbide.

- Sciacquare molto bene con acqua corrente e asciugare con aria compressa.

Pulizia meccanica:

- Inserire con la dovuta attenzione lo strumento con le ganasce aperte con un idoneo cestello per il lavaggio.
- Avviare il programma collaudato che deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Disinfezione termica da 5 a 10 minuti con una temperatura compresa tra 90° e 93° A₀ >= 3000.
 - Risciacquo finale con acqua distillata o desalinizzata.
 - Asciugatura del prodotto.
- Lubrificare le parti mobili.

Confezionamento:

Il prodotto può essere sterilizzato sia smontato che montato. Le valvole devono essere aperte imballato-confezionato in doppia carta.

Sterilizzazione:

Procedimento in vuoto frazionato con asciugatura. Da 3 a 18 minuti ad una temperatura compresa tra 132° e 135°.

Limiti del ricondizionamento: la durata del prodotto è stata dimostrata per 50 cicli di ricondizionamento puro (senza stress operativo).

Il numero di possibili riutilizzi può ridursi anche a seconda delle sollecitazioni presenti durante l'uso.

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'infermiere delegato, tramite ispezione e verifica del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere mod. 0288).