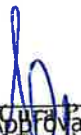


SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità Operative
 - A. Blocco Motore
 - B. Cannule Motore
4. Valutazione e controllo

Redazione		Verifica		CASA di CURA Privata Città di Bra S.p.A. IL DIRETTORE SANITARIO MANFREDI GRASSO	
Firma		data	5/12/22	Firma	
		data	6/12/22	Firma	
		data	7/12/22		

ATTENZIONE: la mancanza delle firme indica che questo documento è una stampa della versione aggiornata disponibile in rete ed utilizzabile per sola lettura.

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione operativa è quello di uniformare i comportamenti nella procedura per la riprocessazione del Motore Medtronic.

2. DESTINATARI

Infermiere, Oss e personale dedicato al lavaggio ferri.

3. MODALITA' OPERATIVE

A. BLOCCO MOTORE



DECONTAMINAZIONE

Il motore non deve essere immerso, mentre il cavo sì. Il corpo del motore si avvolge in più strati di TNT imbevuti in decontaminante.

LAVAGGIO

Si lava con acqua corrente, tenendo sempre il corpo rivolto verso il basso.

RISCIACQUO

Con acqua corrente tenendo sempre il corpo verso il basso.

ASCIUGATURA

Si asciuga con panno morbido, bianco ed aria compressa (corpo sempre verso il basso).

CONFEZIONAMENTO

Assicurarsi che le due frecce coincidano fra di loro →←

B. CANNULE MOTORE



DECONTAMINAZIONE

Si immerge la cannula in una brocca con il decontaminante facendo attenzione che il fondo della cannula non sia a contatto con il liquido.

LAVAGGIO

Si effettua lavaggio con detergente neutro e panno morbido.

Le cannule rette si possono scovolinare da parte a parte.

Le cannule curve non si devono scovolinare da parte a parte, si usa lo scovolino piccolo (quello utilizzato per le frese cannulate) e si inserisce solo nella parte finale (cioè nella punta).

RISCIACQUO

Cannule rette, si risciacqua con acqua corrente tenendo coperta l'estremità con il dito per evitare che entri all'interno.

ASCIUGATURA

Si asciuga con panno morbido e aria compressa, tenendo sempre il corpo rivolto verso il basso.

LUBRIFICAZIONE

Tutti gli attacchi devono essere lubrificati, anche quelli che non sono stati usati.

Cannule Rette: Spruzzare il lubrificante all' interno del fondo.

Cannule Curve: Spruzzare il lubrificante all' interno del fondo.

Articolare per 10 volte minimo lo snodo



Asciugare l'eccesso con panno morbido.

CONFEZIONAMENTO

Assicurarsi che le frese curve, quando posizionate all' interno del container con il selettore in posizione APERTO 

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).