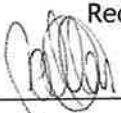
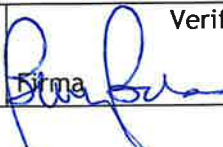


Istruzione
REPARTO OPERATORIO
**Procedura per apparecchiatura
Lotus/Bowa**

Codice	I so 67 P so 01-02
Rif. Procedura P so 01 Sez. 7.5 MQ	Pag. 1 di 2
Rev. 00	del 8/11/2022

SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Redazione		Verifica		Casa Apparecchiatura Città di Bra S.p.A. DIRETTORE SANITARIO MANFREDI GRASSO	
Firma		data	8/11/22	Firma	
				data	10/11/22
				Firma	
				data	10/11/22

ATTENZIONE: la mancanza delle firme indica che questo documento è una stampa della versione aggiornata disponibile in rete ed utilizzabile per sola lettura.

1. SCOPO

La seguente istruzione ha lo scopo di eseguire un corretto utilizzo dell'apparecchiatura Lotus/Bowa e standardizzare la procedura.

2. DESTINATARI

Infermieri.

3. MODALITA' OPERATIVE

Il materiale dell'apparecchiatura Lotus/Bowa è costituito da:

- Centralina Lotus e pedale (sulla colonna urologica)
- Manipolo pluriuso (Dentro il container sterile)
- Manipolo monouso (Cod. DS4-400CD, in blocchino)

L'utilizzo di tale dispositivo è il seguente:

1. Accendere l'apparecchiatura attraverso un pulsante dislocato posteriormente e collegare sempre posteriormente il pedale (Codice colore nero-nero, grigio-grigio)
2. Collegare il cavo del manipolo nell'apposito ingresso anteriore (Sul display posteriore verrà riportata la percentuale di utilizzo del manipolo stesso), da riferire al personale del confezionamento
3. Con l'apparecchiatura accesa, premere il pulsante grigio del pedale: sul display dell'apparecchiatura si accenderà un semicerchio blu con dicitura "Low", ripremere lo stesso pulsante: si accenderà un semicerchio giallo con dicitura "High"; a questo punto l'apparecchiatura è pronta per l'uso.
4. A termine dell'utilizzo spegnere l'apparecchiatura, gettare la parte monouso, recuperare il manipolo pluriuso per il confezionamento, pulire e disinfettare senza immergere il pedale.

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative.