

SOMMARIO

1. Scopo
2. Modalità Operative

Redazione	Verifica	Approvazione
Firma <i>P. Lombardi</i> data <i>12/9/2024</i>	Firma <i>P. Fenu</i> data <i>27/9/24</i>	Firma <i>[Signature]</i> data <i>30/9/24</i> Casa di Cura Città di Bra S.p.A. Il Direttore Sanitario Dott. ELIO BORASO

ATTENZIONE: la mancanza delle firme indica che questo documento è una stampa della versione aggiornata disponibile in rete ed utilizzabile per sola lettura.

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di formare gli operatori della Casa di Cura sulla corretta modalità di esecuzione e gestione dei risultati dei tamponi molecolari (naso-faringei e salivari) e rapidi (nasali) COVID-19.

Tale istruzione si rende necessaria dal momento che è stato introdotto questo esame per tutte le persone che afferiscono alla Casa di Cura per un intervento chirurgico.

2. MODALITÀ OPERATIVE

a) ACCETTAZIONE ESAME

Il personale di laboratorio o il personale del prericovero prenota l'esame su Sysmed, utilizzando uno di questi codici.

- tampone molecolare nasofaringeo codificato su Sysmed con codici differenti:
 - ✓ **44100:**
 - pazienti che accedono in clinica per un intervento chirurgico
 - pazienti della casa di Cura San Michele,
 - pazienti della casa di Cura Sant'Anna di Casale,
 - pazienti ambulatoriali che effettuano il tampone a proprio carico per motivi di lavoro, di viaggio, ecc
 - pazienti inviati dalle ditte per motivi di medicina del lavoro.
 - ✓ **44140** - pazienti che vengono dimessi dalla Casa di Cura
 - ✓ **44110** - pazienti che vengono dimessi dalla Casa di Cura e che si pagano l'esame
 - ✓ **44170** - pazienti che vengono trasferiti alla struttura La Residenza di Rodello
 - ✓ **44180** - pazienti che vengono trasferiti alla struttura Sant'Anna di Imperia
 - ✓ **44190** - pazienti che vengono trasferiti alla struttura Villa Serena di Piossasco
 - ✓ **44130** - pazienti che vengono trasferiti alla struttura Sant'Anna di Asti
 - ✓ **44160** - pazienti che vengono trasferiti alla struttura Stella del Mattino di Boves
 - ✓ **44120** - tampone per accompagnatore
- tampone **rapido nasale** codificato su Sysmed con il codice **44500**
- tampone **molecolare salivare** codificato su Sysmed con il codice **44600**

b) ESECUZIONE DEL TAMPONE

Il Personale infermieristico esegue il tampone secondo le seguenti istruzioni:

TAMPONE MOLECOLARE NASOFARINGEO E RAPIDO NASALE

Il tampone o naso-faringeo o nasale è un esame rapido sia per gli adulti che per i bambini: si esegue in pochi secondi.

È una procedura semplice, poco invasiva e poco fastidiosa. Viene effettuato utilizzando un bastoncino con un piccolo cotton fioc a una estremità, che viene introdotto, nel caso del tampone nasofaringeo, prima nella gola, procedendo a toccare l'arcata sopra le tonsille, poi nelle narici, procedendo fino a raggiungere la parete posteriore del rinofaringe, dove viene ruotato delicatamente ed estratto.


TAMPONE RAPIDO NASALE

La procedura è la medesima, ma si effettua solo nel naso.

TAMPONE MOLECOLARE SALIVARE

Il tampone salivare è un esame rapido sia per gli adulti che per i bambini: si esegue in poco più di un minuto.

È una procedura semplice, poco invasiva e poco fastidiosa. Viene effettuato utilizzando un bastoncino con una spugnetta ad una estremità che deve essere passata all'interno delle mucose del cavo orale e appoggiata sulla lingua, il tutto per la durata di circa un minuto.

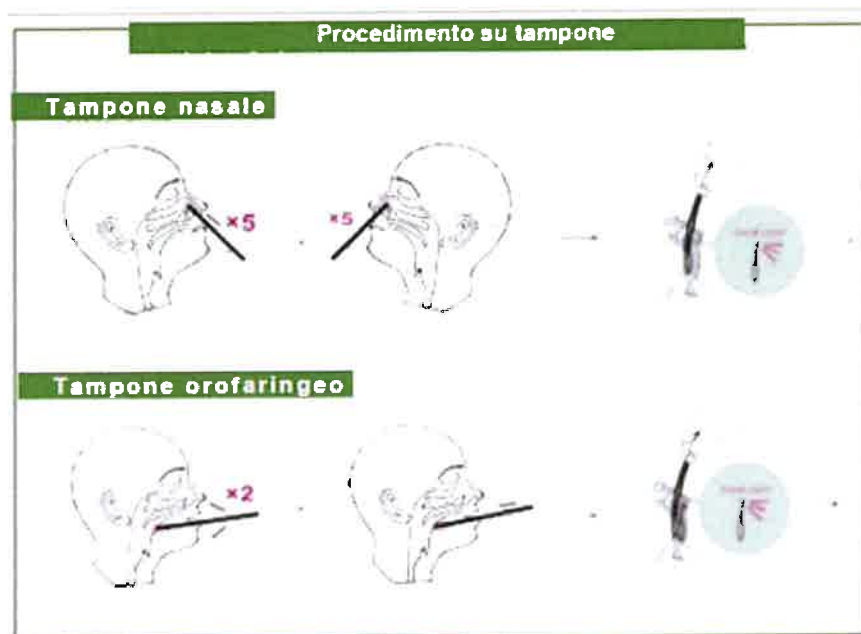

TAMPONE MOLECOLARE NASOFARINGEO: Il bastoncino è inserito in una provetta contenente un liquido di trasporto, per poi essere inviato al laboratorio che esegue l'analisi. Su ogni provetta è incollata l'etichetta identificativa del campione da analizzare.

TAMPONE MOLECOLARE SALIVARE: Il bastoncino è inserito in una provetta di trasporto, per poi essere inviato al laboratorio che esegue l'analisi. Su ogni provetta è incollata l'etichetta identificativa del campione da analizzare.

TAMPONE RAPIDO NASALE: Il bastoncino è inserito in una provetta contenente un agente di estrazione e ruotato almeno cinque volte (circa un minuto); viene quindi rimosso, avendo cura di comprimere le pareti della provetta sul bastoncino, al fine di trattenere tutto il materiale biologico.

Tre gocce di liquido sono seminate sull'apposita card, correttamente identificata con i dati del paziente. Si attendono 15 minuti per leggere il risultato, operazione svolta dal personale infermieristico o di laboratorio.

Per ottimizzare l'esecuzione dei tamponi ai pazienti preoperatori è stata predisposta una griglia che consente all'operatore di gestire in modo ordinato l'esecuzione di più tamponi in sequenza.

c) INVIO DEI TAMPONI MOLECOLARI (NASO FARINGEI e SALIVARI) AL LABORATORIO LAMAT

Dal gestionale di laboratorio (SYSMED), il personale di laboratorio verifica di avere tutti i dati necessari per il laboratorio LAMAT (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, numero e tipologia di documento di riconoscimento, numero telefonico di cellulare). Successivamente provvede ad esportare le richieste di analisi direttamente sul gestionale del LAMAT. I campioni, opportunamente etichettati, vengono preparati per essere consegnati al corriere.

d) GESTIONE DEI RISULTATI

TAMPONE MOLECOLARE NASOFARINGEO e SALIVARE

Il laboratorio LAMAT fornisce i risultati circa 24 ore dopo l'esecuzione e li rende disponibili sul proprio portale consultabile on line. I referti vengono scaricati in laboratorio analisi e inseriti manualmente sul gestionale SYSMED. Quindi vengono firmati, stampati e distribuiti ai vari reparti. I risultati vengono inseriti sulla piattaforma regionale COVID direttamente dal LAMAT.

TAMPONE RAPIDO NASALE

Dopo 15 minuti i tamponi sono refertati da personale di laboratorio su Sysmed, firmati, stampati e distribuiti ai vari reparti. I risultati dei singoli tamponi sono inseriti sulla piattaforma regionale COVID, dal personale di laboratorio.